

Sprays désinfectants rapides

 DM IIa
 directive 93/42

ANIOSPRAY QUICK prêt à l'emploi

Performances :

- virucide
- bactéricide
- mycobactéricide
- fongicide
- levuricide

- ▶ à base d'éthanol
- ▶ odeur agréable

- produits biocides
- désinfection des surfaces, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs, préalablement nettoyés
- pulvériser uniformément (80 ml/m²), rinçage inutile, sauf si la surface entre en contact avec la peau ou les muqueuses

Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN1040, EN13727, EN 13697, T 72-281
- **mycobactéricide** : EN 14348, EN 13697
- **levuricide** : EN 1275, EN 13624, EN 13697, T 72-281
- **fongicide** : EN 1275, EN 13624, EN 13697
- **virucide** : PRV (Virus modèle HCV), BVDV (Virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus


référence
Prix HT
DA3300 Flacon 1 litre sans pulvérisateur, l'unité

DA3305 Bidons 5 litres, l'unité

DA3320 Pulvérisateur pour flacon 1 litre, l'unité

Les performances des désinfectants et antiseptiques

Normes de base

Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, des normes de base définissent :

- l'action du désinfectant sur des micro-organismes déterminés, ce qui permet de spécifier le **spectre d'activité** : bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, levuricide ou sporicide
- le **temps de contact** nécessaire
- la **température** d'utilisation
- les **conditions d'utilisation** : "en condition de propreté", "en condition de saleté", "en présence d'eau dure", etc.
- la **concentration** du produit

Normes d'application

En plus de ces bases, des normes d'application, différentes selon le domaine d'activité, précisent les conditions d'application du désinfectant pour un usage donné

Spectre	Phase 1 : normes de base	Phase 2 : normes d'application	
		essais en suspension	essais sur des surfaces
agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1276	NF EN 13697
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1650	NF EN 13697
Sporicide	NF EN 14347	NF EN 13704	-
vétérinaire			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1656	NF EN14349 / NF EN16437
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1657	NF EN16438
Mycobactéricide	-	NF EN 14204	-
Virucide	-	NF EN 14675	-
médecine humaine			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 13727	NF EN 14561 / NF EN 16615
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 13624	NF EN 14562 / NF EN 16615
Mycobactéricide	-	NF EN 14348	NF EN 14563
Virucide	-	NF EN 14476	-
autres domaines			
Bactéricide	NF EN 1040	-	NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791

* fongicide = action contre les levures ET les moisissures

ANIOSPRAY QUICK

Disinfectant
for spraying



- Ready to use solution
- Ethanol-based composition
- Broad activity spectrum in short contact time
- Does not leave any trace when drying
- Pleasantly fragranced
- Aldehyde free, without colouring

INDICATIONS

Swift disinfection of previously cleaned, non-immersible medical devices resistant to alcohol (stethoscopes, cables and connectors, pressure sensors, blood sugar testers,...).

CARACTERISTICS

- Ready to use product
- Clear colourless solution
- Density : approx 0.9
- pH at +20°C : approx 5.5

READY
TO USE




**Laboratoires
ANIOS**
Le professionnel de la désinfection






ANIOSPRAY QUICK

Disinfectant for spraying

INSTRUCTIONS FOR USE


To be used with manual sprayer ANIOS equipment.

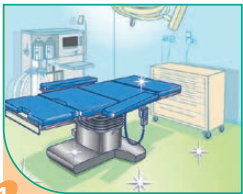

1 Previously clean the medical devices with an ANIOS detergent disinfectant.



2 Spray an even film on the medical devices surfaces.

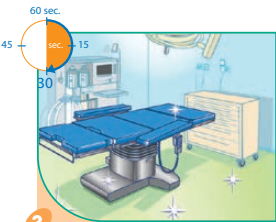

3 Leave for a 30 second minimum contact time.

QUALITATIVE COMPOSITION

Hydroalcoholic solution (ethanol 55%), quaternary ammonium propionate, fragrance.

PRECAUTIONS FOR USE

Flammable – Please follow the instructions for use (drawn up in accordance with European Directive 99/45/CE). Information available on the Safety Data Sheet and the label. store between +5°C and +25°C. Class IIa medical device [Directive 93/42/EEC as amended]

PACKAGING

- 1 12 bottles, 1L each with 4 sprayers Ref. 2084.073
- 2 4 cans, 5 litres each Ref. 2084.034

MICROBIOLOGICAL PROPERTIES

Active against	Standards	Contact time
Bacteria	EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. SARM (EN 14561)	30 sec.
Mycobacteria	Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563 Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563	30 sec. 5 min.
Yeasts / Moulds	Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, En 13697. Tricophyton mentagrophytes : EN 14562 Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562, En 13697.	30 sec. 5 min.
Viruses	Adenovirus, HIV-1, PRV (surrogate of HBV), BVDV (surrogate of HCV), Vaccinia virus*, Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A [H,N,] Feline Calicivirus	30 sec. 5 min.

* RKI : The Robert Koch Institute recommends the use of disinfectants claiming "begrenzt viruzid wirksan", i.e. limited virucidal activity to interrupt the infection-chain. According to the RKI, the limited virucidal activity corresponds to an activity against vacciniavirus and BVDV.



GB2084-1 30530- Non contractual photographs

