



Armoires de sécurité certifiées EN14470-1 pour produits inflammables

- ▶ certifiées EN14470-2 / 30 minutes ou EN14470-1 / 90 minutes, suivant modèle
- ▶ aménagement intérieur avec tiroirs coulissants ou étagères fixes

construction rigide en torsion, mise à niveau facile

- armoires de sécurité conformes et certifiées norme EN14470-1 et 2 : résistance au feu 30 ou 90 minutes
- 7 couleurs au choix : jaune, gris, rouge, vert, bleu, argent ou blanc.



châssis gris anthracite, façades de portes disponibles en 7 couleurs

socle de transport et plinthe amovible pour faciliter le transport et la maintenance

Façades de portes disponibles en 7 couleurs

couleur	jaune	gris	rouge	bleu	vert	argent	blanc
code RAL	1004	7035	3020	5010	6011		9010
code	J	G	R	B	V	A	W

Ajoutez le code couleur à la suite de la référence de l'armoire



Signalétique compacte, simple et claire.




Serrure anti-effraction, fermeture centralisée, témoins couleur de fermeture (rouge / vert).

	armoires 1 porte* largeur 600 mm		armoires 1* ou 2 portes** largeur 900 mm		armoires 2 portes largeur 1200 mm	
	porte standard	porte assistée automatique	portes standard	portes assistées automatiques	portes standard	portes assistées automatiques
dimensions externes (lxpxh mm)	600 x 615 x h1955	600 x 615 x h1955	900 x 615 x h1955	900 x 615 x h1955	1200 x 615 x h1955	1200 x 615 x h1955
dimensions internes (lxpxh mm)	450 x 520 x h1645	450 x 520 x h1645	750 x 520 x h1645	750 x 520 x h1645	1050 x 520 x h1645	1050 x 520 x h1645
pois	265 kg	265 kg	265 kg / 343 kg	343 kg	424 kg	424 kg
étagère	dimensions (lxpxh)	345 x 505 x h50 mm	345 x 505 x h50 mm	565 x 510 x h90 mm	865 x 510 x h90 mm	865 x 510 x h90 mm
	charge max./étagère	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
tiroir	dimensions (lxpxh)	345 x 500 x h50 mm	345 x 500 x h50 mm	565 x 500 x h50 mm	865 x 500 x h50 mm	865 x 500 x h50 mm
	charge max./tiroir	25 kg	25 kg	60 kg	60 kg	60 kg
bac de rétention, capacité	22 litres	22 litres	23 litres	23 litres	33 litres	33 litres
30 min	3 étag. + bac rét. + caillebotis	EQ3061	-	EQ3091	-	EQ3011
	4 tiroirs	EQ3062	-	EQ3092	-	EQ3012
	6 tiroirs	EQ3063	-	EQ3093	-	EQ3013
90 min	3 étag. + bac de rét. + caillebotis	EQ9061	EQ9064	EQ9091	EQ9094	EQ9011
	4 tiroirs	EQ9062	EQ9065	EQ9092	EQ9095	EQ9012
	6 tiroirs	EQ9063	EQ9066	EQ9093	EQ9096	EQ9013

* Ouverture de la porte : charnières de porte à droite de série, possibilité de charnières de porte à gauche, sans supplément (sur demande).

** Armoires résistant au feu 30 minutes : 1 seule porte / Armoires résistant au feu 90 minutes : 2 portes.

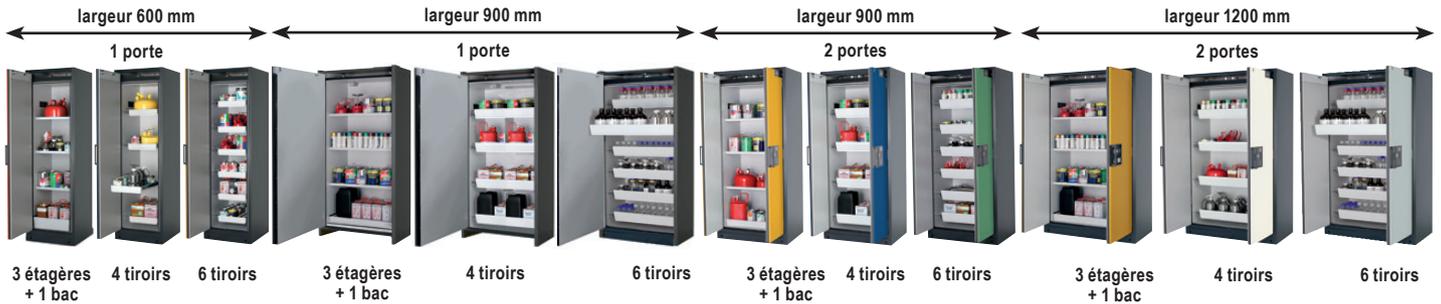

Construction

- construction à double paroi en acier verni recouvert d'une protection plastique résistante, antidérapante et anticorrosion
- rigidité maximale en torsion
- serrure anti effraction avec témoin :
rouge = porte verrouillée / **vert** = porte déverrouillée
- raccord de ventilation Ø75 mm sur le toit de l'armoire pour ventilateur externe

Portes standard

- les portes peuvent rester dans toute position ouverte de 0° à 90°, grâce au frein de porte réglable
- en cas d'élévation de la température, un thermofusible enclenche la fermeture automatique des portes

Portes assistées automatiques

- **fermeture automatique temporisée** : un dispositif de temporisation déclenche la fermeture automatique des portes après 60 s : un indicateur LED clignote tant que les portes sont ouvertes, après 60 s un signal sonore prévient de la fermeture imminente des portes; dans tous les cas, fermeture forcée si la température dépasse +50°C
- **ouverture assistée des deux portes simultanément d'une seule main** (armoires à 2 portes) : l'ouverture d'une porte entraîne automatiquement l'ouverture de l'autre porte grâce à un système d'entraînement couplé asynchrone avec guidage coulissant

3 équipements intérieurs au choix

- modèle avec 3 étagères en acier revêtement époxy, réglables en hauteur, en forme de bac de rétention (charge max. : 75 kg / étagère) + 1 bac de rétention avec 1 caillebotis, pour éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées
- modèle avec 4 tiroirs en acier revêtu époxy, en forme de bac de rétention, à fermeture systématique
- modèle avec 6 tiroirs en acier revêtu époxy, en forme de bac de rétention, à fermeture systématique
- tiroirs pour charges lourdes en inox sur demande

Aménagements individuels en option

- **sur demande** : nombreuses possibilité d'aménagement individuel de l'armoire

Plinthe amovible pour transport et manutention facile

- plinthe frontale amovible au bas de l'armoire pour passage des fourches d'un transpalette

SkateMover

- l'armoire posée sur 2 SkateMover (à l'aide d'un transpalette) est facilement déplacée
- déplacement sur 360° autour d'un axe vertical
- important : option "socle amovible" obligatoire pour l'utilisation des SkateMover




référence

EQ9500 SkateMover, les deux

Prix HT

Ventilation et filtration

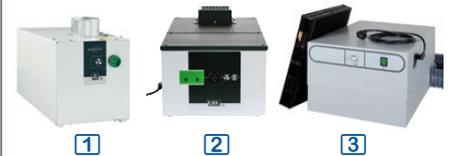

- **EX8436 - ventilation 120 v/h** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du local, gaine d'évacuation long. max. 5 mètres, dim. module 200 x p400 x h200 mm
- **EX8433 1 - ventilation 120 v/h avec alarme visuelle en cas de dysfonctionnement** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du local, gaine d'évacuation longueur max. 5 mètres dim. module 200 x p400 x h200 mm
- **EX8992 2 - ventilation-filtration anti-explosion (ATEX CE II 3G T4), avec contrôle de l'évacuation d'air et alarme sonore et visuelle**, conforme EN 14470-1 et DIN 12925-1 : boîtier en acier revêtu époxy, silencieux (23 dB), les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques et rejetées dans le local., dim. module : 256 x p555 x h308 mm / 14 kg
- **EX8980, EX8981 3 - ventilation à recyclage d'air filtré conforme à la norme NFX15211 avec ou sans extraction vers l'extérieur** : les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques ou pour vapeurs acides. Un raccord de ventilation DN 75 (Ø 75 mm) permet le rejet des vapeurs à l'extérieur (prévoir 1 gaine d'évacuation) dim. module : 410 x p430 x h300 mm
- **ventilation surpuissante pour plusieurs armoires simultanément** (standard ou ATEX) : sur demande

référence

1 ventilation standard

EX8436 Ventilation standard

EX8433 Ventilation avec alarme

2 ventilation / filtration ATEX CE II G T4

EX8992 Ventilation / filtration ATEX avec filtre AS pour solvants organiques

3 ventilation à recyclage d'air filtré NFX15211

EX8980 Ventilation / filtration avec filtre AS pour solvants organiques

EX8981 Ventilation / filtration avec filtre BE pour vapeurs acides

Prix HT

Livraison et installation

- **livraison standard** : incluse dans le prix de l'armoire, prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète, emballée sur palette, au rez-de-chaussée ou sur quai de déchargement, valable en France métropolitaine hors Corse
- **livraison et installation, prestations supplémentaires à la prestation "livraison standard"** : sur demande