



Ces appareils ne sont pas destinés à stériliser des dispositifs médicaux, ils ne sont pas des dispositifs médicaux CE 93/42.

Autoclaves de paillasse en aluminium

capacité

12 / 18 litres

- cuve en aluminium
- utilisation très simple
- système de verrouillage en toute sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous pression, soupape de commande anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression

- chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau (durée de vie plus longue)
- manomètre de précision
- soupape d'évacuation
- ventilation par circulation
- panier métallique en option
- livrés avec un plateau à instruments en aluminium, Ø 25 x h40 mm


i

Stérilisation des instruments, appareils, milieux de culture, flacons et déchets.



3

1

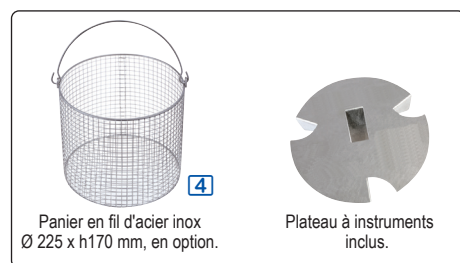

Panier en fil d'acier inox
Ø 225 x h170 mm, en option.

Plateau à instruments
inclus.

Autoclaves 12 litres

dim. intérieur : Ø 240 x h260 mm
dim. ext. : 420 x 300 x h450 mm
poids : 8 kg

Autoclaves 18 litres

dim. intérieur : Ø 240 x h390 mm
dim. ext. : 420 x 300 x h520 mm
poids : 9 kg



1



2



3

température	+115°C ou +121°C	+125°C ou +140°C	Programmable jusqu'à +140°C
contrôle	contrôle par thermostat et soupape avec visualisation, thermomètre de précision	contrôle par thermostat et soupape avec visualisation, thermomètre de précision	contrôle électronique séparé avec affichage numérique
programmes	-	-	2 programmes fixes et 7 libres (T°C, durée et étapes de fractionnements)
pression de fonctionnement	de 0,7 Bar à 1,3 Bar	de 1,4 Bar à 2,7 Bar	2,7 Bar
interfaces / connexions	-	-	mV et RS232
anomalies	-	-	détection automatique des anomalies
logiciel analyse données	-	-	logiciel basic inclus
capteur de température	-	-	capteur Pt 100 inclus
alimentation / puissance	230 V / 50 Hz / 1900 W	230 V / 50 Hz / 1900 W	230 V / 50 Hz / 1900 W
Autoclaves 12 litres	PB1500 1	PB1501 2	PB1502 3
Autoclaves 18 litres	PB1503	PB1504	-
accessoires			
panier métallique Ø 230 mm 4	PB1555	PB1555	PB1555
filtre d'échappement et cuve	-	-	PB1556
réservoir de condensat	PB1557	PB1557	PB1557
imprimante	-	-	PB1558