



Ces appareils ne sont pas destinés à stériliser des dispositifs médicaux, ils ne sont pas des dispositifs médicaux CE 93/42.

Autoclaves sur paillasse en acier inox

capacité


18 litres



**Stérilisation des
instruments, appareils,
flacons et déchets.**

► modèle programmable

- cuve en acier inox 304L
- utilisation très simple
- système de fermeture : verrouillage en toute sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous pression, soupape de commande anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression
- chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau (durée de vie plus longue)
- manomètre de précision
- soupape d'évacuation
- panier métallique en option
- livrés avec un plateau à instruments en aluminium, Ø 25 x h40 mm

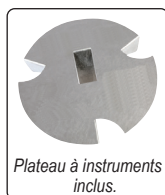

Plateau à instruments
inclus.



4

1

2

3

température	+115°C ou +121°C	+125°C ou +140°C	Programmable jusqu'à +140°C
contrôle	Soupape de précision, thermostat électrique, thermomètre de précision, et minuterie	Soupape de précision, thermostat électrique, thermomètre de précision, et minuterie	6 programmes standard pré-installés
pression max.	2,7 Bar	2,7 Bar	2,7 Bar
dimensions intérieures	Ø 260 x h350 mm	Ø 260 x h350 mm	Ø 260 x h350 mm
interfaces / connexions	-	-	RS232 / USB
logiciel analyse données	-	-	logiciel CertoCloud basic inclus
dim. extérieures / poids	440 x 400 x h600 mm / 10 kg	440 x 400 x h600 mm / 10 kg	440 x 400 x h600 mm / 10 kg
alimentation / puissance	230 V / 50 Hz / 1900 W	230 V / 50 Hz / 1900 W	230 V / 50 Hz / 1900 W
Autoclaves 18 litres	PB1610 1	PB1612 2	PB1614 3
accessoires			
panier en fil d'acier inox ⁽¹⁾	PB1616 4	PB1616 4	PB1616 4
filtre d'échappement et cuve	-	-	PB1556
réservoir de condensat	PB1557	PB1557	PB1557
imprimante	-	-	PB1558
logiciel PC "professional"	-	-	PB1559

⁽¹⁾ Dimensions : Ø 250 x h170 mm.

Autoclaves horizontaux classe B

capacité

12 à 45 litres

- interface utilisateur révolutionnaire
- stérilisation en moins de 20 min (y compris temps de pré-vide fractionné et séchage)



- en acier inox 304L
- tablette graphique tactile 7", mobile et orientable, protection IP64, résistante aux chocs
- guide vidéo explicatif
- réservoir d'eau et de déchets intégré
- 9 programmes : affichage des détails de chaque programme, stockage local des protocoles, mot de passe
- verrouillage électronique sécurisé de la porte
- pompe à vide
- système de refroidissement par ventilation
- connexion possible de plusieurs autoclaves au réseau local
- connexion à l'espace de stockage CertoCloud via un câble Ethernet ou Wifi
- conformes BPL
- garantie 2 ans
- livrés complet avec 1 tuyau de connexion rapide des eaux usées, 1 jeu de 3 plateaux, 1 porte plateaux, la licence de connexion au serveur de gestion des données CertoCloud

Serveur de gestion
des données



Retrouvez la documentation complète
sur notre site internet

www.labomoderne.com

PB1715

