

# Bains-marie électroniques

temp. maxi  
**+100°C**




Modèles 4 et 16 litres avec système d'agitation permettant d'assurer une parfaite homogénéité de température dans le bain.

- ▶ contrôleur : grand écran tactile couleur
- ▶ fonction timer

**i**

## Système d'homogénéisation

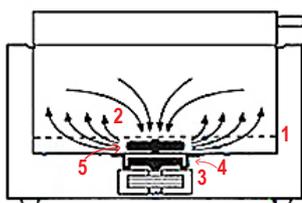

- 1 - Grille de fond perforée
- 2 - Circulation d'eau
- 3 - Moteur électrique
- 4 - Aimant rotatif
- 5 - Barreau magnétique

- écran tactile couleur avec affichage et réglage de la température
- alarmes sonores et visuelles
- cuve en acier inox
- chauffage rapide
- sécurités de surchauffe indépendantes
- livrés avec couvercle en acier inox, plaque de fond perforée et robinet de vidange

## Bains homogénéisés

- un agitateur magnétique en fond de cuve et un barreau magnétique enrobé de PTFE assurent une parfaite circulation de l'eau dans le bain
- uniformité optimale de la température dans tout le bain



5



1



2



3



4

capacité	4 litres	8 litres	16 litres	22 litres	24 litres long : 600 mm	41 litres profond : p335 mm
température	ambiante+5°C à +100°C					
précision à 50°C	±0,1°C					
dim. intérieures (L x l x p)	245 x 100 x p165 mm	245 x 200 x p165 mm	400 x 245 x p165 mm	400 x 245 x p225 mm	600 x 245 x p165 mm	410 x 296 x p335 mm
capacité portoirs	2 portoirs	4 portoirs	8 portoirs	8 portoirs	12 portoirs	9 portoirs
puissance chauffage	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
alimentation	230 V - 50 Hz					
dim. ext. bains standard (l x p x h)	340 x 290 x h275 mm	340 x 395 x h275 mm	500 x 440 x h275 mm	500 x 440 x h345 mm	700 x 440 x h275 mm	510 x 490 x h465 mm
dim. ext. bains à circulation	-	340 x 395 x h345 mm	500 x 440 x h345 mm	-	-	-
poids bains standard/à circula	7,4 kg / -	11 kg / 13 kg	15 kg / 18 kg	17 kg / -	22 kg / -	26 kg / -
Bains-marie standard	GF6104	GF6108 <b>1</b>	GF6116 <b>2</b>	GF6122	GF6124 <b>3</b>	GF6141 <b>4</b>
Bains-marie homogénéisés	-	GF6208	GF6216	-	-	-
accessoires - portoirs en acier inox						
portoir pour 20 tubes Ø12 mm <b>5</b>	GF6001	GF6001	GF6001	GF6001	GF6001	GF6001
portoir pour 20 tubes Ø16/17 mm	GF6002	GF6002	GF6002	GF6002	GF6002	GF6002
portoir pour 5 tubes Ø31 mm	GF6003	GF6003	GF6003	GF6003	GF6003	GF6003