

Laveurs-désinfecteurs de laboratoire grande cuve

- ▶ version traversante avec 2 portes, pour séparer les zones propre/sale
- ▶ chauffage électrique ou électrique + vapeur, suivant modèle
- ▶ adaptation de la performance et la consommation d'eau grâce à une pompe à vitesse variable

- largeur 900 ou 1150 mm, la largeur 900 mm est déclinée en version 1 porte ou version traversante 2 portes, pour séparer les zones propre et sale
- bras de lavage avec buse, système de surveillance de la vitesse de rotation du bras
- module de mesure de la conductivité intégré
- écran tactile couleur 7"
- porte guillotine automatique entièrement vitrée
- éclairage LED blanc, vert, rouge de la cuve, pour un contrôle rapide de l'avancée du processus
- système de chargement EasyLoad : assiste l'utilisateur pour le positionnement correct de la verrerie
- combinaison de deux pompes de circulation :
 - une pompe à vitesse variable adaptant



1 + 4



2



3 + 4

la pression de rinçage à la charge et aux exigences du process

- une pompe dédiée aux bras de lavage
- paniers de chargement de base, modules et injecteurs pour une configuration parfaitement adaptée à chaque application
- éléments de chauffage à l'extérieur de la cuve
- système de séchage double très performant
- système de double filtres : 1 filtre grossier et 1 filtre fin (mailles 0,2 mm), auto-net-

toyés lors de la vidange

- 1 filtre HEPA en amont élimine efficacement les particules du ventilateur et des éléments chauffants
- programmes préinstallés personnalisables, mémoire 200 programmes
- cuve en inox 316L, surfaces inclinées, arêtes arrondies
- tiroir de stockage des produits chimiques sous le laveur avec 2 pompes de dosage contrôlées par un débitmètre précis
- clapet de vidange



éclairage LED blanc, vert, rouge de la cuve, permet un contrôle rapide de l'avancée du processus

largeur	laveurs 900 mm - 1 porte 1		laveurs 900 mm - 2 portes traversantes 2		laveurs 1150 mm - 1 porte 3	
dimensions cuve	650 x 800 x h675mm		650 x 800 x h675mm		650 x 800 x h675mm	
volume utile	351 litres		351 litres		351 litres	
dimensions extérieures (lxpxh)	900 x 990 x h2495 mm / ≈ 380 kg		900 x 990 x h2495 mm / ≈ 400 kg		1150 x 990 x h2495 mm / ≈ 390 kg	
alimentation	400 V+N / 50 Hz triphasé / 8000 W		400 V+N / 50 Hz triphasé / 8000 W		400 V+N / 50 Hz triphasé / 8000 W	
type de chauffage	électrique	électrique / vapeur	électrique	électrique / vapeur	électrique	électrique / vapeur
Laveurs sans réservoir	ME7010	ME7015	ME7020	ME7025	ME7030	ME7035
Laveurs avec réservoir de préchauffage	-	-	-	-	ME7130	ME7135
Laveurs avec réservoir de recyclage	-	-	-	-	ME7230	ME7235
Laveurs avec réservoir(s) : préchauffage et recyclage*	ME7310	ME7315	ME7320	ME7325	ME7330	ME7335
options						
séchage électrique	ME7401	ME7401	ME7401	ME7401	ME7401	ME7401
condenseur de vapeur	ME7402	ME7402	ME7402	ME7402	ME7402	ME7402
pompe de vidange	ME7403	ME7403	ME7403	ME7403	ME7403	ME7403
système dosage récipient 5 l.	ME7404	ME7404	ME7404	ME7404	ME7404	ME7404
système dosage récipient 10 l.	ME7405	ME7405	ME7405	ME7405	ME7405	ME7405
chariot de transfert en inox 4	ME7406	ME7406	ME7406	ME7406	ME7406	ME7406

* 1 réservoir mixte pour les laveurs largeur 900mm, et 2 réservoirs pour les laveurs largeur 1150 mm

Paniers de base


					
Référence MIELE	A500	A501	A505	A506	A500 + A603
niveaux	1 niveau	4 niveaux (5 ou 6 niveaux avec A601)	3 niveaux	4 niveaux	2 niveaux
dim. chargement (l x p x h mm)	600 x 775 x h670 mm	577 x 750 x h168 mm 585 x 750 x h169 mm 585 x 780 x h 77 mm 577 x 750 x h 80 mm	585 x 780 x h202 mm 590 x 780 x h202 mm 590 x 780 x h132 mm	585 x 780 x h112,5 mm 595 x 780 x h112,5 mm 595 x 780 x h112,5 mm 595 x 780 x h114 mm	600 x 775 x h305 mm 595 x 770 x h302 mm
Paniers de base	ME7411	ME7412	ME7413	ME7414	ME7415

Panier et modules à injection



Pour erlenmeyers,
ballons, flacons,
éprouvettes, cylindres.

- panier de base, combinable avec un module à bras, pouvant recevoir jusqu'à 6 modules à injecteurs, sur 2 niveaux
- cadre de maintien : placé au-dessus du module, pour maintenir la verrerie

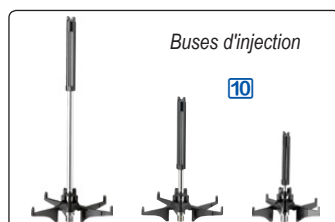

	référence	Prix HT
panier pour module à injection A503	[5] ME7420	
module à bras A606	[6] ME7421	
Modules pour buses d'injection (sans les buses)		
module 10 emplacements pour buses	[7] ME7422	
module 20 emplacements pour buses	[8] ME7423	
module 40 emplacements pour buses	[9] ME7424	
Buses d'injection		
buse d'injection Ø 6 x 130 mm, l'unité	[10] ME6161	
buse d'injection Ø 6 x 210 mm, l'unité	[10] ME6162	
buse d'injection Ø 4 x 90 mm, l'unité	[10] ME6163	
buse d'injection Ø 4 x 185 mm, l'unité	[10] ME6164	
buse d'injection Ø 2,5 x 80 mm, l'unité	[10] ME6165	
buse d'injection Ø 2,5 x 125 mm, l'unité	[10] ME6166	
Cadres de maintien		
cadre de maintien pour ME7422	[11] ME7425	
cadre de maintien pour ME7423	[12] ME7426	
cadre de maintien pour ME7424	[13] ME7427	
Modules à injection spéciaux avec buses à injection		
module 98 buses pour pipettes avec cadre de maintien	[14] ME7431	
module 98 buses pour tubes ou éprouvettes	[15] ME7432	
module 4 buses pour éprouvettes 1 à 2 litres	[16] ME7433	
Modules à injection pour verrerie grand volume		
module pour verrerie grand volume, sans injecteur	[17] ME7434	
injecteur pour ballons et flacons jusqu'à 10 litres	[18] ME7435	
injecteur pour erlenmeyers jusqu'à 5 litres	[19] ME7436	
injecteur pour éprouvettes jusqu'à 5 litres	[20] ME7437	

