


## Incinérateur de bactéries




- ▶ 7 angles d'inclinaison
- ▶ stérilisation en 5 à 7 s

- en acier inox, résistant aux UV et solvants
- stabilité assurée par un support lourd
- base avec 3 encoches support-instruments
- cylindre orientable avec système auto-bloquant
- affichage de chaleur résiduelle indiquant la présence de températures élevées
- utilisables en atmosphère dépourvue d'oxygène, idéal pour les laboratoires où l'utilisation de gaz et de flammes vives est interdite

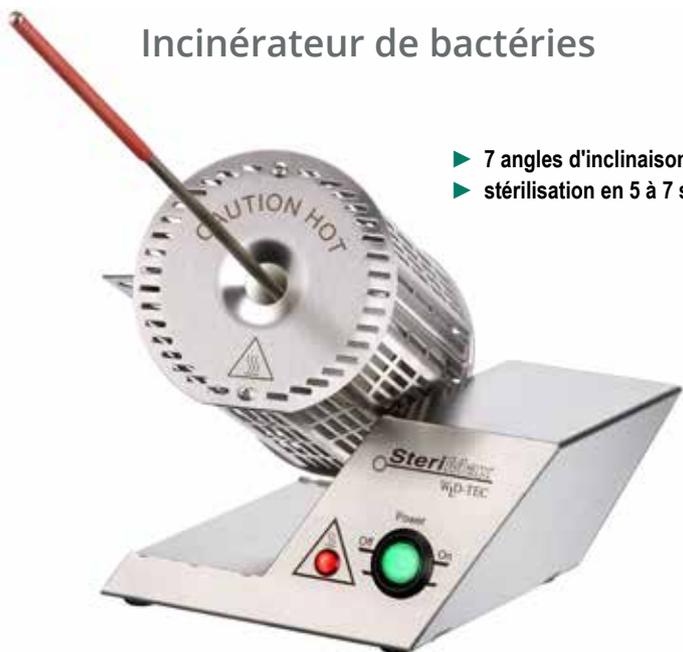

Base avec 3 encoches.

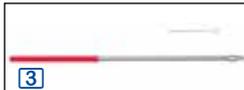

tube chauffant	tube court quartz doublé céramique	tube long quartz doublé céramique
<b>dimensions du tube</b>	Ø 15 x 118 mm	Ø 20 x 161 mm
<b>température de stérilisation</b>	900°C à 950°C	900°C à 950°C
<b>montée en température</b>	10 à 16 min	10 à 16 min
<b>temps de stérilisation</b>	5 à 7 secondes	5 à 7 secondes
<b>cylindre orientable</b>	sur 90°, 7 positions	sur 90°, 7 positions
<b>puissance</b>	160 W	225 W
<b>dimensions (lxpxh)</b>	175 x 129 x h139 mm	175 x 129 x h169 mm
<b>poids</b>	0,960 kg	1,060 kg
<b>alimentation</b>	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
<b>Stérilisateurs d'anses</b>	WD6500	WD6600
<b>accessoires stérilisateurs</b>		
<b>support de porte-anse</b> [1]	WD7005	WD7005
<b>support universel pour porte-anse</b>	WD7006	WD7006
<b>plateau pour 3 porte-anses</b> [2]	WD7007	WD7007
<b>porte-anses pour anses Ø 0,6 à 1 mm, en acier inox, code couleur pour le manche</b>		
<b>longueur 215 mm, les 4</b> [3]	WD5005	WD5005
<b>longueur 245 mm, les 4</b>	WD5006	WD5006

## Stérilisateur d'anses électriques avec capteur infrarouge


- ▶ rapide, efficace, sans flamme
- ▶ pas de temps de préchauffage
- ▶ stérilisation en 5 à 10 s
- ▶ mise en service automatique par détection infrarouge



- large panneau d'affichage frontal en verre, protection IP20, résistant à la chaleur
- structure en acier inox résistant aux UV et aux solvants
- mise en service automatique par capteur infrarouge
- tube chauffant en quartz
- utilisables en atmosphère dépourvue d'oxygène et sous hotte à flux laminaire
- pas de dégagement de chaleur autour de l'appareil, refroidissement rapide
- compatibles avec tous les modèles d'anses
- nettoyage facile
- disjoncteur thermique, arrêt automatique après 1 heure de non utilisation
- affichage digital et signal sonore réglable pour stérilisation et refroidissement
- paramétrable pour deux utilisateurs simultanément
- livré avec un porte anse, une anse Ø 3 mm et un support pour 3 porte-anse au dos de l'appareil



Support pour 3 porte-anse au dos de l'appareil.

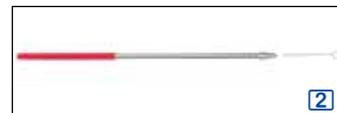

tube chauffant	tube en quartz
<b>température de stérilisation</b>	750°C - 1000°C
<b>temps de stérilisation</b>	5 à 10 secondes
<b>puissance</b>	600 W
<b>dimensions du tube</b>	Ø 16 mm x 112 mm
<b>dimensions (lxpxh)</b>	110 x 180 x h170 mm
<b>poids</b>	1,8 kg
<b>alimentation</b>	230 V - 50 Hz
<b>Stérilisateurs d'anses</b>	WD6700 [1]
<b>accessoires stérilisateurs</b>	
<b>plateau mobile pour 5 porte-anses</b>	WD7008
<b>porte anse en acier inox, code couleur pour le manche</b>	
<b>longueur 215 mm, les 4</b> [2]	WD5005 [2]
<b>longueur 245 mm, les 4</b>	WD5006