


Kits de diagnostics parasitologique des selles STILLQUICK®

- filtration, extraction, concentration et coloration **SIMULTANÉES**
- détection des protozoaires, larves et œufs de vers
- médecine humaine et vétérinaire

+ Système unique à deux tubes vissés l'un sur l'autre.

Contenu des kits BASIC :

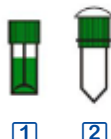

- 1 50 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml d'une solution active différente selon les kits
- 2 50 tubes à centrifuger avec filtre intégré

Hygiène et sécurité

- aucun danger d'infection
- pas d'odeurs


Facilité

- pas de limite de temps entre le prélèvement et l'analyse
- ni chauffage, ni refroidissement entre le prélèvement et l'analyse
- concentration des parasites quand ils sont trop rares pour être décelés à l'examen direct
- manipulations simplifiées au maximum
- traitement de grands volumes en peu de temps
- économie de place et de temps

Fiabilité


- respect des directives nationales et internationales (UE, CDC, OMS, BGA, DPG)
- excellentes reproductibilité, fiabilité des diagnostics, qualité de vision au microscope
- la morphologie des parasites et des oeufs de parasites restent rigoureusement intacte

Contenu des kits ECO :

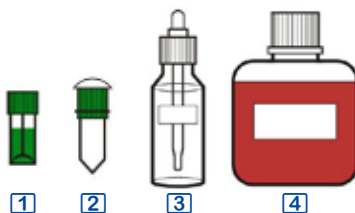

- 1 50 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml d'une solution active différente selon les kits
- 2 50 tubes à centrifuger avec filtre intégré
- 3 1 flacon compte-gouttes gradué en verre ambré
- 4 1 bouteille en plastique remplie de 75 ml de solution combinée séparation / coloration

Contenu des kits PREMIUM :

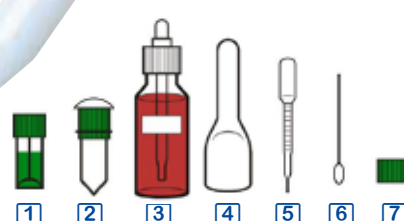

- 1 50 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml d'une solution active différente selon les kits
- 2 50 tubes à centrifuger avec filtre intégré
- 3 1 flacon compte-gouttes gradué en verre ambré, rempli de 30 ml de solution combinée séparation / coloration
- 4 50 cuillères d'échantillonnage
- 5 50 pipettes Pasteur 1 ml à usage unique
- 6 50 écouvillons en coton
- 7 50 bouchons à vis


Kits	Kits FixSepard®	Kits MIF	Kits SAF	Kits BAILLENGER
solution active contenue dans le tube de prélèvement	le FixSepard® est un fixateur sans Formol, sans merthiolate (composé toxique du mercure) et sans éther	Mercuriothiolate, Iode, 6% de Formol	acétate de Sodium, acide Acétique, 4% de Formol	Cristal Violet, Fuchine basique cristallisée, Éthanol à 95°, Phénol cristallisé
Kits BASIC, les 50 analyses	SQ1010	SQ1020	SQ1030	SQ1040
Kits ECO, les 50 analyses	SQ2010	SQ2020	SQ2030	SQ2040
Kits PREMIUM, les 50 analyses	SQ3010	SQ3020	SQ3030	SQ3040

Technique




1 - Prélèvement

- introduire l'échantillon dans le tube de prélèvement pré-rempli avec une solution bactéricide, virucide, fongicide, parasiticide
- mélanger à l'aide du mélangeur à trous, soudé au bouchon du tube
- revisser le tube qui peut être transporté et examiné plus tard

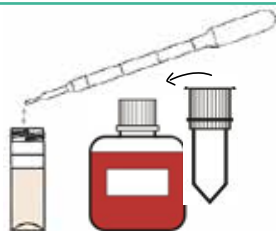

2 - Extraction

- après mélange, ajouter la solution combinée séparation / coloration
- jeter le bouchon avec le mélangeur
- visser le tube à centrifuger spécial muni d'un adaptateur contenant un filtre

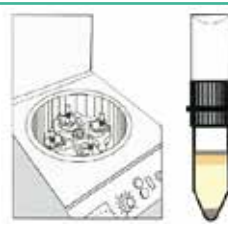

3 - Filtration, centrifugation, concentration

- agiter le système, laisser reposer, centrifuger
- après centrifugation, les particules grossières restent sur le filtre
- 4 phases se forment dans le tube à centrifuger : particules fines, graisses dissoutes, phase aqueuse et sédiment



4 - Examen microscopique

- jeter le tube de prélèvement et l'adaptateur
- jeter les 3 phases supérieures
- conserver le sédiment contenant le concentré de parasites
- déposer sur une lame pour examiner au microscope