



Processus de
sédimentation rapide et
fiable, en toute sécurité.

Examens parasitologiques STILLQUICK® DUO Kits duo des techniques Bailenger, SAF, MIF

- **filtration, extraction, concentration et coloration SIMULTANÉES**
- **détection des protozoaires, larves et œufs de vers**
- **médecine humaine et vétérinaire**

Hygiène et sécurité


- aucun danger d'infection
- pas d'odeurs

Facilité

- pas de limite de temps entre le prélèvement et l'analyse
- ni chauffage, ni refroidissement entre le prélèvement et l'analyse
- concentration des parasites quand ils sont trop rares pour être décelés à l'examen direct
- manipulations simplifiées au maximum
- traitement de grands volumes en peu de temps
- économie de place et de temps


Fiabilité

- respect des directives nationales et internationales (UE, CDC, OMS, BGA, DPG)
- excellentes reproductibilité, fiabilité des diagnostics, qualité de vision au microscope
- la morphologie des parasites et des oeufs de parasites restent rigoureusement intacte

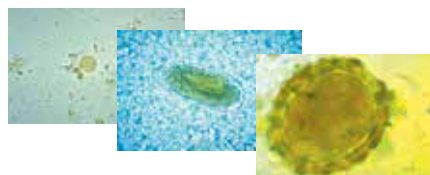

Contenu des kit STILLQUICK® DUO :

solution 1 : solution 2 :
Bailenger SAF, MIF ou FixSepard®

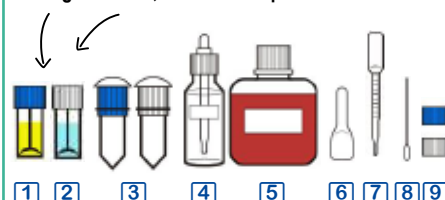

- 1 25 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml de solution Bailenger
- 2 25 tubes de prélèvement, préremplis de 3,5 ml de solution SAF, MIF ou FixSepard®
- 3 50 tubes à centrifuger, avec filtre intégré
- 4 1 flacon compte-gouttes gradué en verre ambré
- 5 75 ml de solution combinée séparation / coloration
- 6 50 cuillères d'échantillonnage
- 7 50 pipettes Pasteur 1 ml à usage unique
- 8 50 écouvillons en coton
- 9 50 bouchons à vis



+ Système unique
à deux tubes vissés
l'un sur l'autre.


Kits duo	Kit BAILINGER / SAF	Kit BAILINGER / FixSepard®	Kit BAILINGER / MIF
tubes de prélèvement 1 (BAILINGER)	Cristal Violet, Fuchsine basique cristallisée, Éthanol à 95°, Phénol cristallisé	Cristal Violet, Fuchsine basique cristallisée, Éthanol à 95°, Phénol cristallisé	Cristal Violet, Fuchsine basique cristallisée, Éthanol à 95°, Phénol cristallisé
tubes de prélèvement 2 (SAF, FixSepard® ou MIF)	acétate de Sodium, acide Acétique, 4% de Formol	le FixSepard® est un fixateur sans Formol, sans mercuriote (composé toxique du mercure) et sans éther	Mercuriote, Iode, 6% de Formol
Kits DUO les 25 + 25 analyses	STILLQUICK2A	STILLQUICK2B	STILLQUICK2C

Technique




1 - Prélèvement

- introduire l'échantillon dans le tube de prélèvement pré-rempli avec une solution bactéricide, virucide, fongicide, parasiticide
- mélanger à l'aide du mélangeur à trous, soudé au bouchon du tube
- revisser le tube qui peut être transporté et examiné plus tard

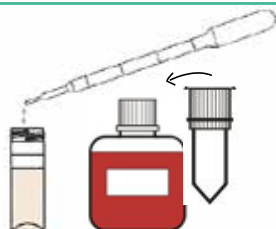

2 - Extraction

- après mélange, ajouter la solution combinée séparation / coloration
- jeter le bouchon avec le mélangeur
- visser le tube à centrifuger spécial muni d'un adaptateur contenant un filtre

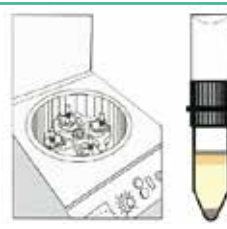

3 - Filtration, centrifugation, concentration

- agiter le système, laisser reposer, centrifuger
- après centrifugation, les particules grossières restent sur le filtre
- 4 phases se forment dans le tube à centrifuger : particules fines, graisses dissoutes, phase aqueuse et sédiment



4 - Examen microscopique

- jeter le tube de prélèvement et l'adaptateur
- jeter les 3 phases supérieures
- conserver le sédiment contenant le concentré de parasites
- déposer sur une lame pour examiner au microscope