


ÉCOUVILLONS

Brossettes LMR® prélèvement cervical

certification
UE 2017/745

deltalab
micro-brosse conique
en nylon

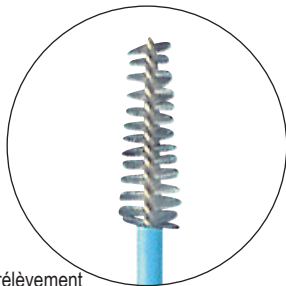



- particulièrement adaptée au prélèvement des cellules cervicales
- prélèvement par une seule rotation de l'écouvillon dans le canal cervical
- dépôt des cellules prélevées sur la lame porte-objet par une rotation dans le même sens que la rotation du prélèvement
- la micro-brosse peut facilement être séparée de la tige à l'aide de ciseaux pour être placée dans un tube à essai, dans un milieu de culture ou de transport

- longueur totale : 200 mm
- usage unique
- en vrac, ou stériles en emballage individuel sous blister

référence	référence	Prix HT
Écouvillons stériles , emballage individuel	BROS71 les 500	
Écouvillons standard, en vrac	BROS72 les 50	

Brossettes EndoCervex-Brush® prélèvement endocervical

certification
UE 2017/745

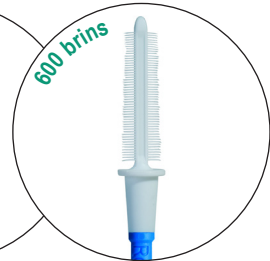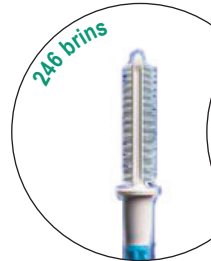


- tête amovible 34 mm, composée de 2 rangées de brins courts en polypropylène, 2 x 300 brins en standard ou 2 x 123 brins pour les patientes très jeunes ou très âgées, ou en cas de zone de jonction endocol - exocol réduite ou de sténose du canal endocervical (canal cervical étroit)
- brosse flexible : épouse parfaitement les contours de l'endocol, prélèvement indolore et non traumatisant

- longueur totale 200 mm
- tige en polypropylène, longueur 166 mm
- permet l'étalement direct sur lame ou la restitution directe en milieu liquide
- usage unique
- modèles stériles en emballage individuel

référence	référence	Prix HT
Brosses EndoCervex-Brush® 600 brins	HC1020 les 50	
Brosses EndoCervex-Brush® 600 brins, stériles	HC1022 les 100	
Brosses EndoCervex-Brush®-S 246 brins	HC1025 les 50	
Brosses EndoCervex-Brush®-S 246 brins, stériles	HC1027 les 100	

Brossettes Cervex-Brush® prélèvement cervical / endocervical

certification
UE 2017/745

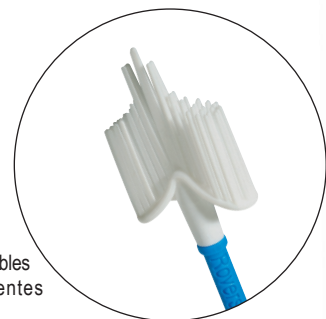

- tête amovible avec 57 brins flexibles en polyéthylène de différentes longueurs :
 - les brins longs, au centre, prélèvent les cellules dans la partie endocervicale
 - les brins courts, de chaque côté, permettent le prélèvement sur les contours du col de l'utérus
- brosse flexible épousant parfaitement les contours du col de l'utérus, prélèvement indolore et non traumatisant
- longueur totale 199 mm

- tige en polypropylène, longueur 165 mm
- prélèvement de cellules sur toutes les zones en un seul geste
- usage unique
- modèles stériles en emballage individuel

référence	référence	Prix HT
Brosses Cervex-Brush® standard	HC1010 les 50	
Brosses Cervex-Brush® stériles	HC1012 les 100	

Brossettes Cervex-Brush combi® prélèvement cervical/endocervical

certification
UE 2017/745



- tête amovible avec 1 dispositif de prélèvement endocervical au centre et des brins flexibles, de chaque côté, pour le prélèvement sur les contours du col de l'utérus
- longueur totale 201 mm
- tige en polypropylène, longueur 165 mm
- prélèvement de cellules sur toutes les zones en 2 rotations

- recommandé en cas de zone de jonction endocol - exocol réduite ou de sténose du canal endocervical (canal cervical étroit)
- usage unique

référence	référence	Prix HT
Brosses Cervex-Brush combi® standard	HC1030 les 50	
Brosses Cervex-Brush combi® stériles	HC1032 les 100	