

Brûleurs électriques

- chauffage uniforme
- base froide au toucher



- l'élément chauffant, de forme conique, dirige la chaleur rayonnante vers le haut, vers un point focal
- chauffage sans contact de tubes à essai, creusets, petits flacons et béchers
- en acier inox, résistent à la corrosion
- le capot supérieur détourne la chaleur de la main
- boîtier ventilé : la circulation d'air maintient la base froide au toucher

1

- modèle avec régulateur : bouton de commande analogique, 2 voyants : "On" et "Bunsen activé", puissance jusqu'à 800 W., fixation pour statif à l'arrière

	brûleurs
température maximum	±800°C
puissance	400 W
alimentation	230 V
dimensions	Ø 120 x h 177 mm / 0,5 kg
Brûleur électrique	TA3010
Brûleur électrique avec régulateur	TA3015 1

Allume gaz piézoélectrique



- longueur 220 mm

référence	Prix HT
BC1675 Allume gaz	

Tuyaux à gaz de sécurité à vis G1/2"




Indispensables à la sécurité des laboratoires.



- flexibles, souples, et étanches
- résistants à l'écaillage
- résistants aux gaz, au vieillissement et à la température
- tuyau en caoutchouc : durée de vie 10 ans, tuyau métallique : durée de vie illimitée

tuyau à vis G1/2" normalisé		
longueur	gaz naturel	propane - butane
tuyau en caoutchouc		
1,00 m	TGN2	TGP2
1,50 m	TGN4	TGP4
2,00 m	TGN5	TGP5
tuyau métallique gainé PVC		
0,75 m	TGN6	TGP6
1,00 m	TGN7	TGP7
1,50 m	TGN9	TGP9
2,00 m	TGN10	TGP10

Tuyaux à gaz de sécurité à raccord cannelé

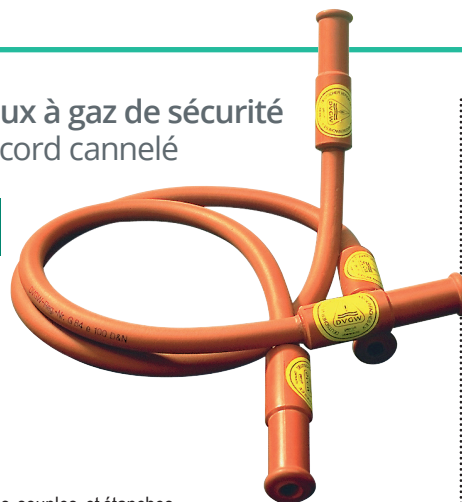

- flexibles, souples, et étanches
- résistants à l'écaillage
- résistants aux gaz, au vieillissement et à la température
- raccords : manchons souples en caoutchouc vulcanisé, contact stable et étanche sans fixation avec colliers
- armature métallique, étanchéité assurée par un revêtement de caoutchouc, construction empêchant la détérioration du tuyau et des manchons, pas de pincement possible
- Ø int. 8 mm

tuyau en caoutchouc avec armure métallique	
longueur	tout gaz
0,50 m	TGAZ50
0,60 m	TGAZ60
0,75 m	TGAZ75
1,00 m	TGAZ100
1,25 m	TGAZ125
1,50 m	TGAZ150
2,00 m	TGAZ200
3,00 m	TGAZ300

Allume gaz automatique



- en plastique

référence	Prix HT
BC1860 Allume gaz	


Racloir de nettoyage



- pour plaques en vitro-céramique

référence	Prix HT
GW2842 Racloir, les 10	


Supports triangle

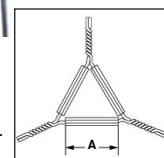

- en acier zingué
- avec tubes en argile


longueur (A)	référence	Prix HT
50 mm	BC1875	
60 mm	BC1876	
70 mm	BC1877	

Grille et trépieds de brûleur

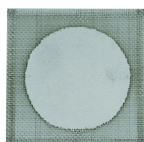

dimensions	référence	Prix HT
grille en fer zingué avec disque céramique		
120 x 120 mm	SML541	
160 x 160 mm	SML542	
200 x 200 mm	SML544	
support trépied en acier inox 18/18		
Ø 100 x 180 mm	SML569	
Ø 120 x 220 mm	SML570	
Ø 150 x 230 mm	SML571	
support trépied en acier chromé		
Ø 100 x 180 mm	SML581	
Ø 120 x 220 mm	SML582	
Ø 150 x 230 mm	SML583	

Plaques-support de sécurité en vitrocéramique

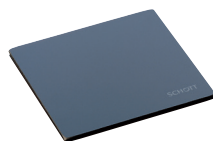

- pour le chauffage des tubes à réaction avec le bec Bunsen
- faible dilatation, faibles tensions
- portoirs en acier inox
- résistance aux liquides corrosifs
- nettoyage simple, matériau non poreux
- résistance aux chocs thermiques : -200°C à +700°C
- pas de déformation, ne vieillissent pas

dimensions de la plaque	135 x 135 mm	155 x 155 mm	175 x 175 mm
Plaques	GP1	GP2	GP3
Support 4 pieds en acier inox	SA1	SA2	SA3
Support avec manche pour montage avec noix	SB1	SB2	SB3

Plaque vitrocéramique



- sur support 4 pieds
- dim. (l x p x h) : 155 x 155 x h 210 mm

référence	Prix HT
WD6930 Plaque vitrocéramique	